


# 恆溫油槽 Oil Bath

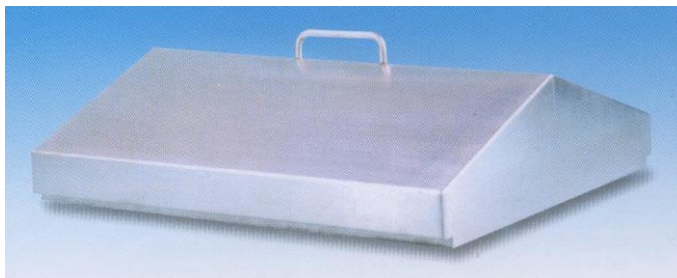

## 規格說明：

溫度範圍：室溫加 10°C~200°C 或 300°C 兩種選擇

溫度控制器：微電腦觸控方式 P.I.D.自動演算功能

溫度控制精度：±0.1°C

溫度測溫體：K (電熱偶)

加熱器：不鏽鋼管製加熱器

攪拌幫浦：不鏽鋼幫浦、耐高溫馬達攪拌循環油槽，使槽內溫度分布均勻

材質：內不銹鋼板 SUS304、外鍍鋅鋼板烤漆，每台均附平蓋

型 式	JOB-10	JOB-20	JOB-30
內部尺寸	W295*D235*H150mm	W495*D295*H150mm	W500*D300*H200mm
外部尺寸	W445*D300*H330mm	W670*D325*H330mm	W570*D360*H400mm
容量	10L	20L	36L
馬達	1/16 HP	1/16 HP	1/16 HP
加熱器	1500W	1800W	3000W
操作空間	W220*235mm	W400*295mm	W400*D300*H200mm
電源	110V/220V 15A/10A	110V/220V 16A/15A	110V/220V 27A/16A

※ 註明：外部循環裝置，及屋頂型蓋請另購，接受更大尺寸容量訂製。