

# 樣品均質機 Sample Mixer

## 拍擊式樣品均質機（鐵胃）特點

- 與無菌袋接觸的拍擊內倉部分採用衛生級不鏽鋼製成，機箱及其它架構部分採用優質的不鏽鋼製成，機蓋則採用優質的高強度合金鋁板製成，表面塗佈高強度、高耐腐特製塗料。整體機器耐用、美觀。
- 三組 LED 數字分別顯示運轉設定時間，已運轉時間和拍擊速度。
- 帶有視窗的安全門便於觀察並確保操作安全，另外還可掀起便於清洗。
- 經由儀器背部的旋鈕可以方便調節拍擊板與安全門之間的距離，以適用於不同的破碎要求。  
（旋鈕每旋轉一圈間距可增加或減少 1mm）
- 儀器內有漏液接盤出口以防止無菌樣品袋破裂造成污染。




## ChromTech® SM-400 拍擊式樣品均質機規格

- 內倉容量：80ml-400ml
- 拍擊板與安全門間距可調範圍：2mm-20mm
- 每秒鐘拍擊次數：5次、6次、7次、8次、9次共5檔
- 定時拍擊時間(秒)：30、60、90、120、180、210、360、390、430、500、600、700、800、900、999秒
- 外形尺寸：L364mm x W240mm x H217mm
- 重量：17kg

## 拍擊式樣品均質機配件：



主機

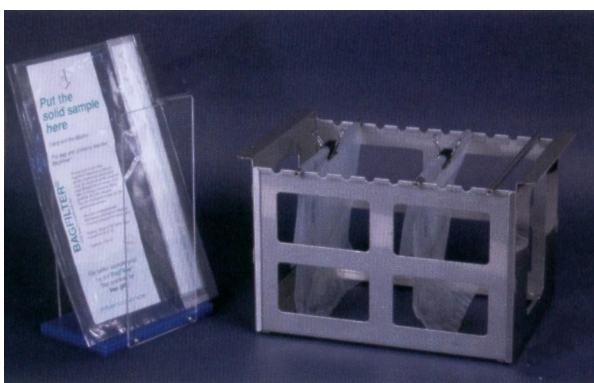

樣品袋

不鏽鋼支撐架

